

Steelcase®
HEALTH

# Sonata™ - استبدال درج أو لوحة تمرير سلة المهملات للخارج في وحدة جزيرة أو وحدة خدمات ممرضة

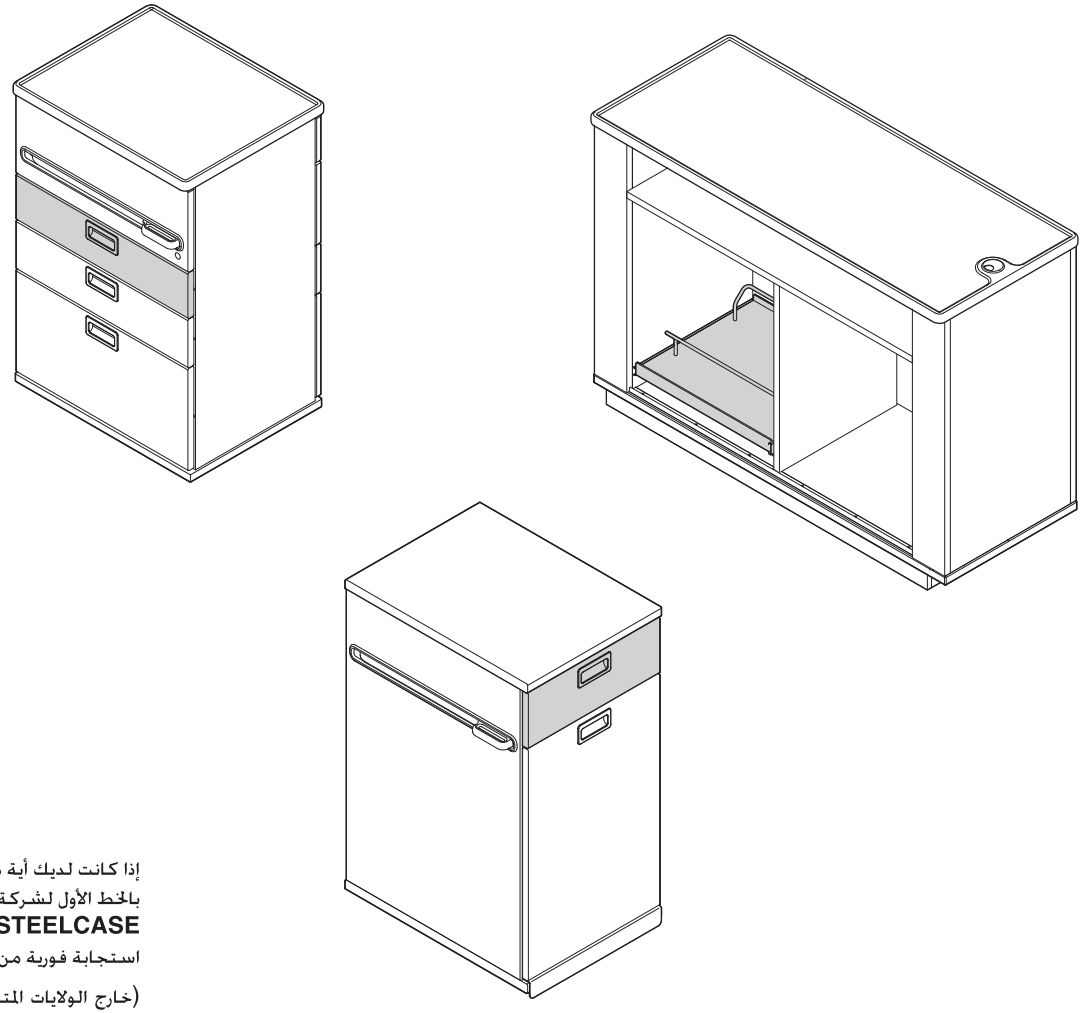

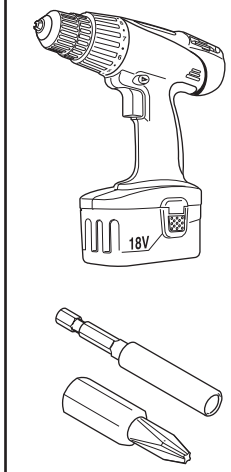


إذا كانت لديك أية مشكلة أو سؤال أو طلب، اتصل بالتاجر المحلي لديك أو بالخط الأول لشركة Steelcase على الخط المجاني **888.STEELCASE** (888.783.3522) للحصول على استجابة فورية من الأشخاص الراغبين في مساعدتك.

(خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبورتوريكو وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال على الرقم: 1.616.247.2500) أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.steelcase.com

© جميع الحقوق لعام 2010 محفوظة لشركة Steelcase Inc.
جراند رابيدز، ميتشجن 49501
الولايات المتحدة الأمريكية

طُبع في الولايات المتحدة الأمريكية

Steelcase®
HEALTH


# استبدال لوحة تمرير سلة مهملات للخارج في وحدة جزيرة (موضحة) أو وحدة خدمات ممرضة مزودة بحاوية نفايات


**1-** اسحب لوحة تمرير سلة المهملات إلى الخارج.


**2-** أزل المسامير الملولبة الثلاثة (3) الموجودة في كلٍ من جانبيّ لوحة تمرير سلة المهملات للخارج.

**3-** ادفع إلى الداخل لوحة تمرير سلة المهملات للخارج (3a) ثم حدد موقع الفتحة المستطيلة على قضيب انزلاق لوحة تمرير سلة المهملات للخارج. أزل مسمار ملولب (1) في كلٍ من جانبيّ قضيب انزلاق لوحة تمرير سلة المهملات للخارج.

**4-** أخرج لوحة تمرير سلة المهملات للخارج وقضبان الانزلاق.

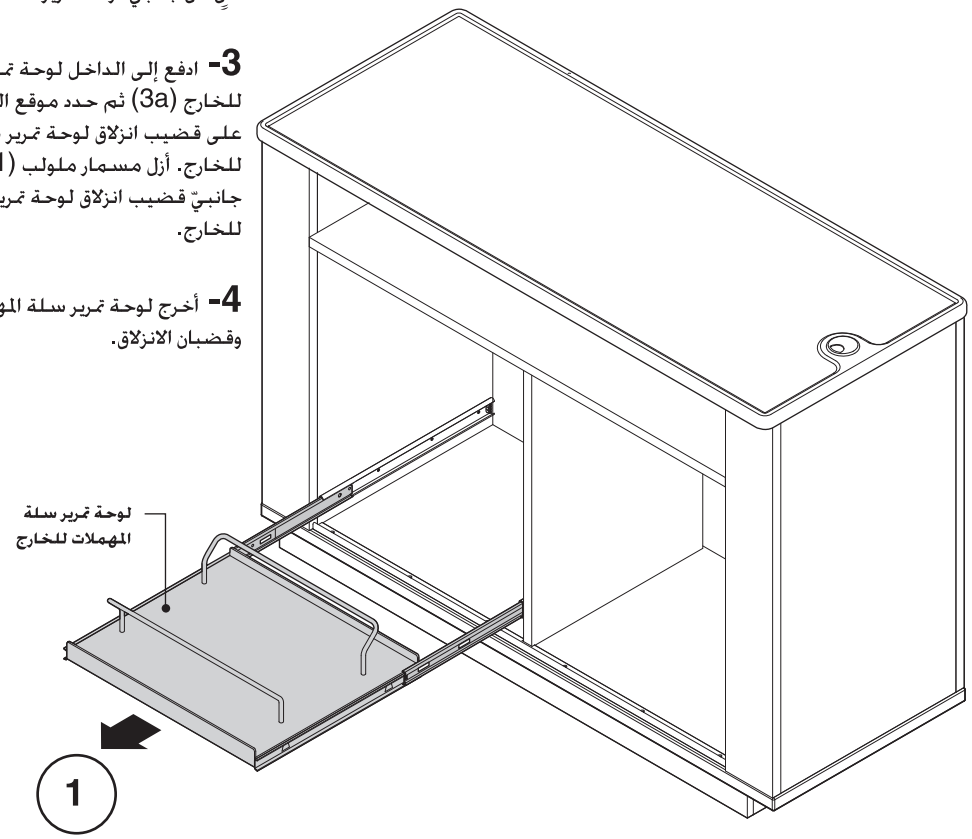

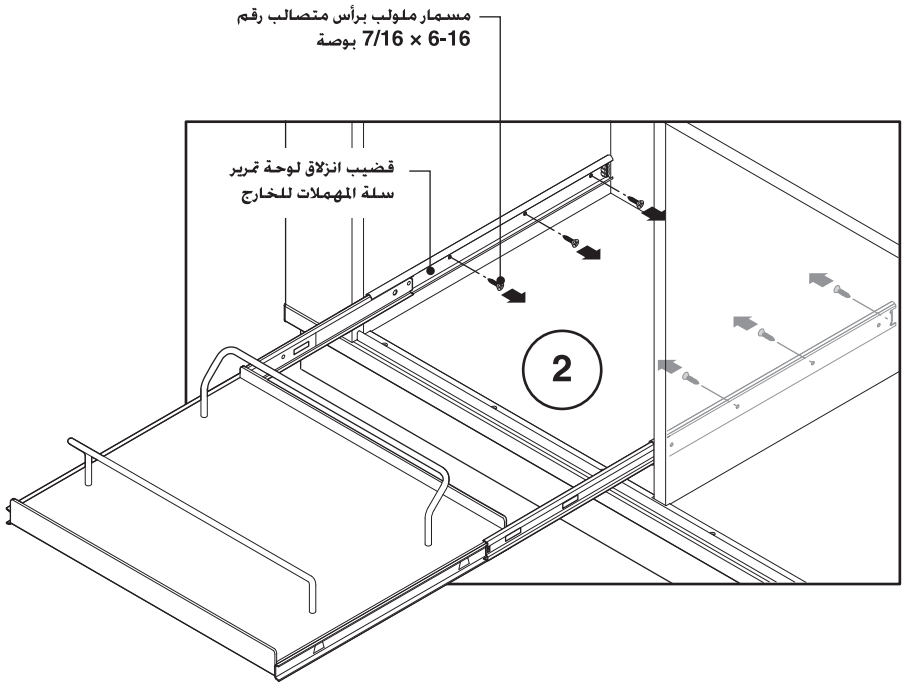


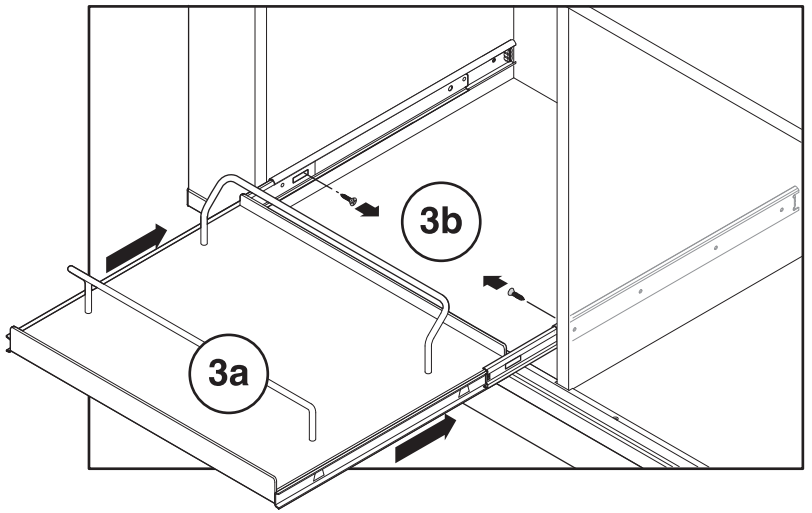
Steelcase®
HEALTH

**5-** أخرج قضيبيّ الانزلاق عبر إزالة المسمارين (2) الملولبين الموجودين في كل قضيب انزلاق.

**6-** اعكس الخطوات من 2 إلى 5 لتركيب لوحة جديدة لتمرير سلة المهملات للخارج أو قضبان انزلاق جديدة.

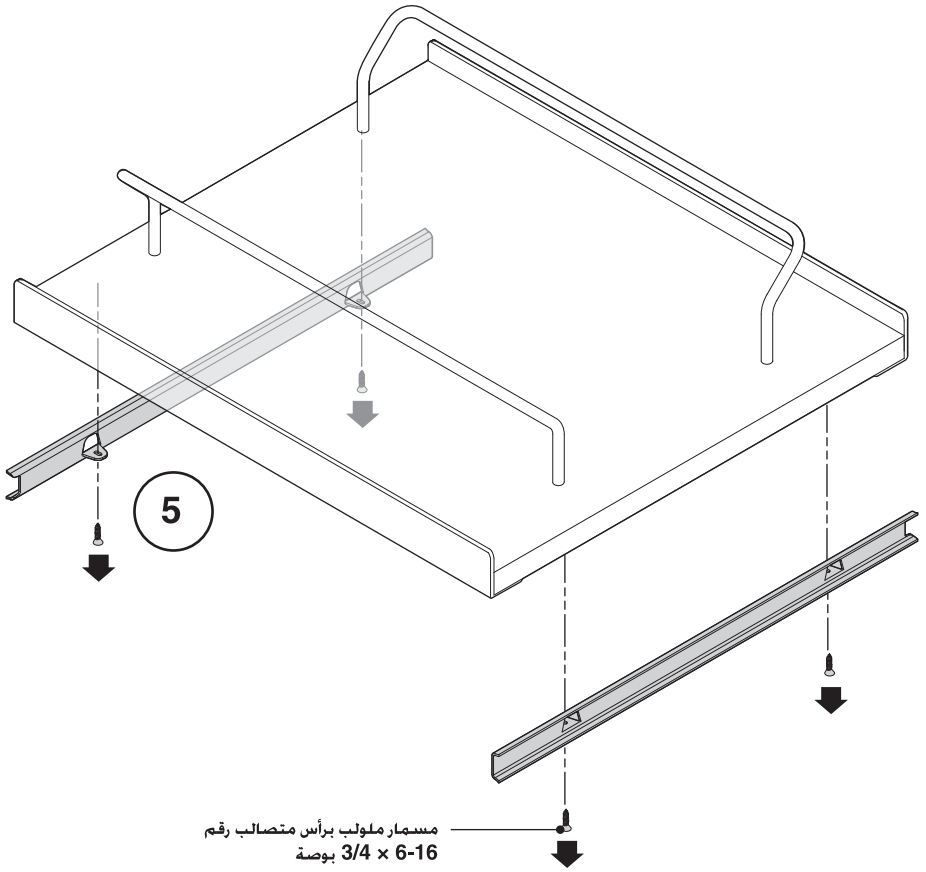

Steelcase®
HEALTH


## استبدال درج في وحدات خدمات الممرضة

**1-** اسحب الدرج إلى الخارج.

**2-** ادفع اللسان في كلا جانبيّ الدرج.

**3-** أخرج الدرج.

**4-** أزل المسامير الملولبة الثلاثة (3) الموجودة في كلٍ من جانبيّ كتيفة تثبيت قضيب انزلاق الدرج.

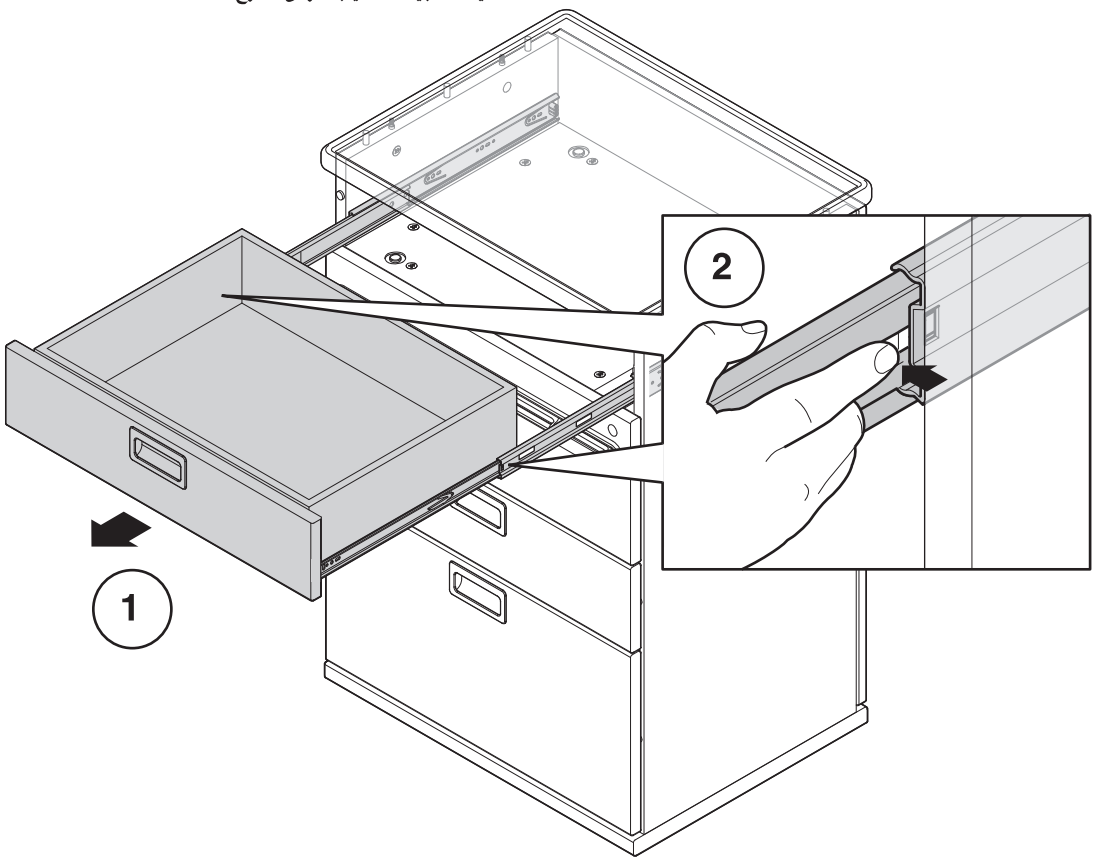


**5-** ادفع قضيبيّ انزلاق الدرج للداخل (5a) ثم حدد موقع الفتحة المستطيلة في قضيب انزلاق الدرج. أزل مسمار ملولب (1) في كلٍ من جانبيّ كتيفة قضيب انزلاق الدرج (5b).

**6-** لتركيب قضبان انزلاق جديدة للدرج، اعكس الخطوتين 4 و5. لتركيب الدرج، اعكس الخطوات من 1 إلى 3.

