

Steelcase®
HEALTH

Reemplazo de una puerta en un módulo isla - Sonata™

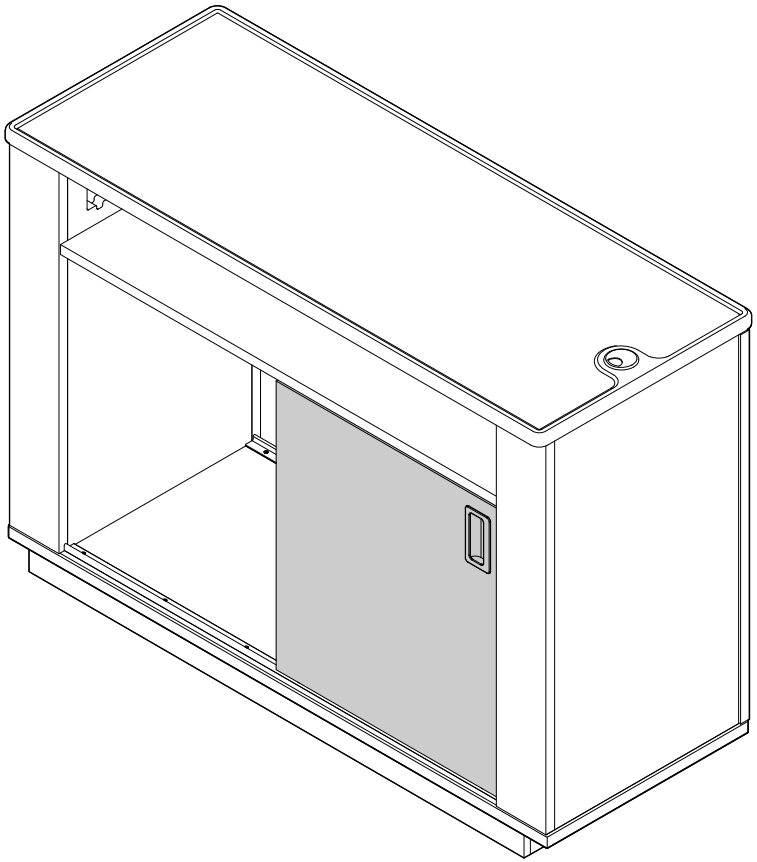

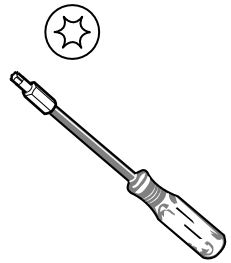

PUNTA DESTORNILLADOR EN ESTRELLA

Si tiene problemas, preguntas o inquietudes, llame a su distribuidor local, o a Steelcase línea 1 al **888.STEELCASE** (888.783.3522) para obtener una acción inmediata de las personas que quieren ayudarle.
(Fuera de U.S.A., Canadá, México, Puerto Rico, y las islas Vírgenes Norteamericanas, llame al 1.616.247.2500) o visite nuestro sitio Web: www.steelcase.com
© 2014 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
Estados Unidos
Impreso en los Estados Unidos

Steelcase®
HEALTH

Reemplazo de una puerta en un módulo isla

1. Retire seis (6) tornillos de la carrilera.

2. Deslice la puerta y la carrilera sacándolas de la unidad.

3. Para instalar la nueva puerta, invierta los pasos 1 y 2 mientras inserta la carrilera inferior en la parte inferior de la puerta e inserta la carrilera superior en la ranura de la parte inferior del anaquel.

